



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

http:// www.real-times.com.cn

E-mail: real-times@vip.163.com

三色预染高分子量蛋白质 Marker IV（20-950 kDa）

TriColor Prestained High Molecular Weight Protein Marker IV（20-950 kDa）

Ver.761070-2.0

货号	名称	规格
RTD6171	三色预染高分子量蛋白质 Marker IV（20-950 kDa）	10 次（100 μ l）

● 贮存、运输及效期：


-20°C 贮存，湿冰运输。按规定条件保存，有效期为 12 个月。避免反复冻融。

● 产品简介：

本产品由 8 种经过纯化和染料标记的蛋白质组成，表观分子量分别约为 950、450、250、150、100、75、45 和 20 kDa。其中，75 kDa 条带为红色，20 kDa 条带为绿色，其余条带均为蓝色。

本产品无需加热或额外处理，可直接用于 SDS-PAGE 电泳，适用于监测蛋白质电泳过程、估算目的蛋白的分子量以及观察 Western Blot 转膜效果。本产品适用于多种 SDS-PAGE 凝胶体系，不同凝胶体系中的条带迁移位置及分离效果可能存在差异。每支 100 μ l，按每次上样 10 μ l 计算，可使用约 10 次。

技术规格	
条带数量	8 条
浓度	0.2-0.4 μ g/ μ l
上样前处理	溶化混匀后使用，不要加热
推荐凝胶体系	3-8% Tris-醋酸体系（适用于高分子量蛋白分离，20 和 45 kDa 条带可能集中于电泳前沿附近）； 4-12% Bis-Tris 体系（适用于宽分子量范围蛋白分离）； 4-15% Tris-甘氨酸体系（950 kDa 条带可能无法进入分离胶或无法清晰分辨）
推荐上样体积	~10 μ l（1mm 厚度 10 齿梳子）
推荐染色方法	无需染色即可观察条带，也可在电泳结束后蛋白染色

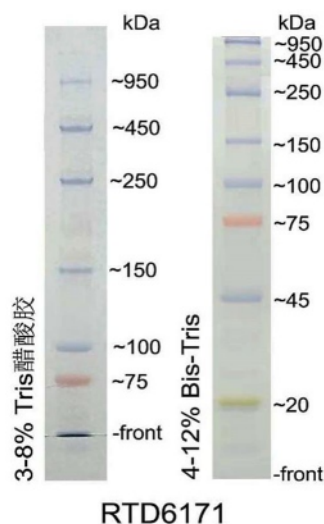

● 使用说明：

- 使用前将产品置于常温溶化，充分混匀后短暂离心，使溶液集中于管底。
- 本产品已含有上样缓冲液，无需额外添加上样缓冲液或还原剂，也无需加热处理，可直接上样。
- 根据凝胶厚度及加样孔宽度调整上样量。对于 1 mm 厚、10 齿梳子的凝胶，推荐每孔上样约 10 μ l，可根据实际需要适当调整。
- 电泳过程中可直接观察蛋白条带的迁移情况。电泳结束后，无需染色即可观察 Marker 条带，也可用于 Western Blot 转膜效果的评估。
- 本产品各条带的标称分子量为经电泳校准的表观分子量。由于预染染料及不同电泳缓冲体系可能影响蛋白质的迁移率，各条带的实际迁移位置可能存在差异。因此，本产品适用于目的蛋白分子量的初步估算，不建议用于蛋白质分子量的精确定量测定。

注：本制品仅供科研用。请勿用于人体及动物的医疗、临床诊断或作为食品、化妆品、家庭用品的添加剂等用途。

中科瑞泰（北京）生物科技有限公司 电话:400-699-0631 E-mail:real-times@vip.163.com <http://www.real-times.com.cn>