



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

[http:// www.real-times.com.cn](http://www.real-times.com.cn)

E-mail: real-times@163.com

三色预染宽分子量蛋白质 Marker II（10-180 kD）

货号	名称	规格
RTD6146	三色预染宽分子量蛋白质 Marker II（10-180 kD）	50 次（250 μl）

● 贮存，效期及运输：


-20℃保存，有效期 12 个月，湿冰运输。

● 产品简介：


本产品包含 10 种纯化的预染蛋白质组成，分子量范围为 10-180 kD，其中 75 kD 条带为红色，25 kD 条带为绿色，其余条带为蓝色，可以用于 SDS-PAGE 和 Western Blot 转膜时确定未知蛋白的分子量。

● 使用说明：

1. 第一次收到该产品，常温溶化后，彻底混匀，离心快甩将溶液完全收集到管底，不要加热处理。
2. 上样量根据胶的厚度和梳子的宽度确定。一般说来，0.75mm×5mm（厚度×宽度）的加样孔上样 5 μl，其他规格梳子请适当调整上样量。
3. 电泳结束后，可以直接在胶上观察结果。
4. 预染蛋白 Marker 在不同的凝胶系统中迁移率会有不同，导致有不同的表观分子量，因此只能用来粗略估计目的蛋白的大小。如要精确确定蛋白的大小，请在同一凝胶系统中用非预染蛋白 Marker 来标定预染蛋白 Marker 的分子量。

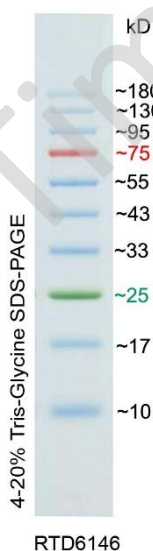

4-20% Tris-Glycine SDS-PAGE

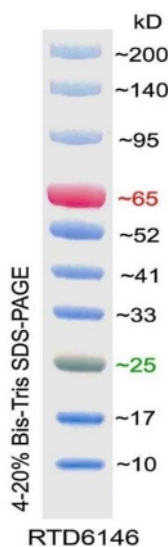

4-20%Bis-Tris SDS-PAGE

注：本制品仅供科研用。请勿用于人体及动物的医疗、临床诊断或作为食品、化妆品、家庭用品的添加剂等用途。
中科瑞泰(北京)生物科技有限公司 电话:400-699-0631 E-mail:real-times@vip.163.com <http://www.real-times.com.cn>